


Colamark

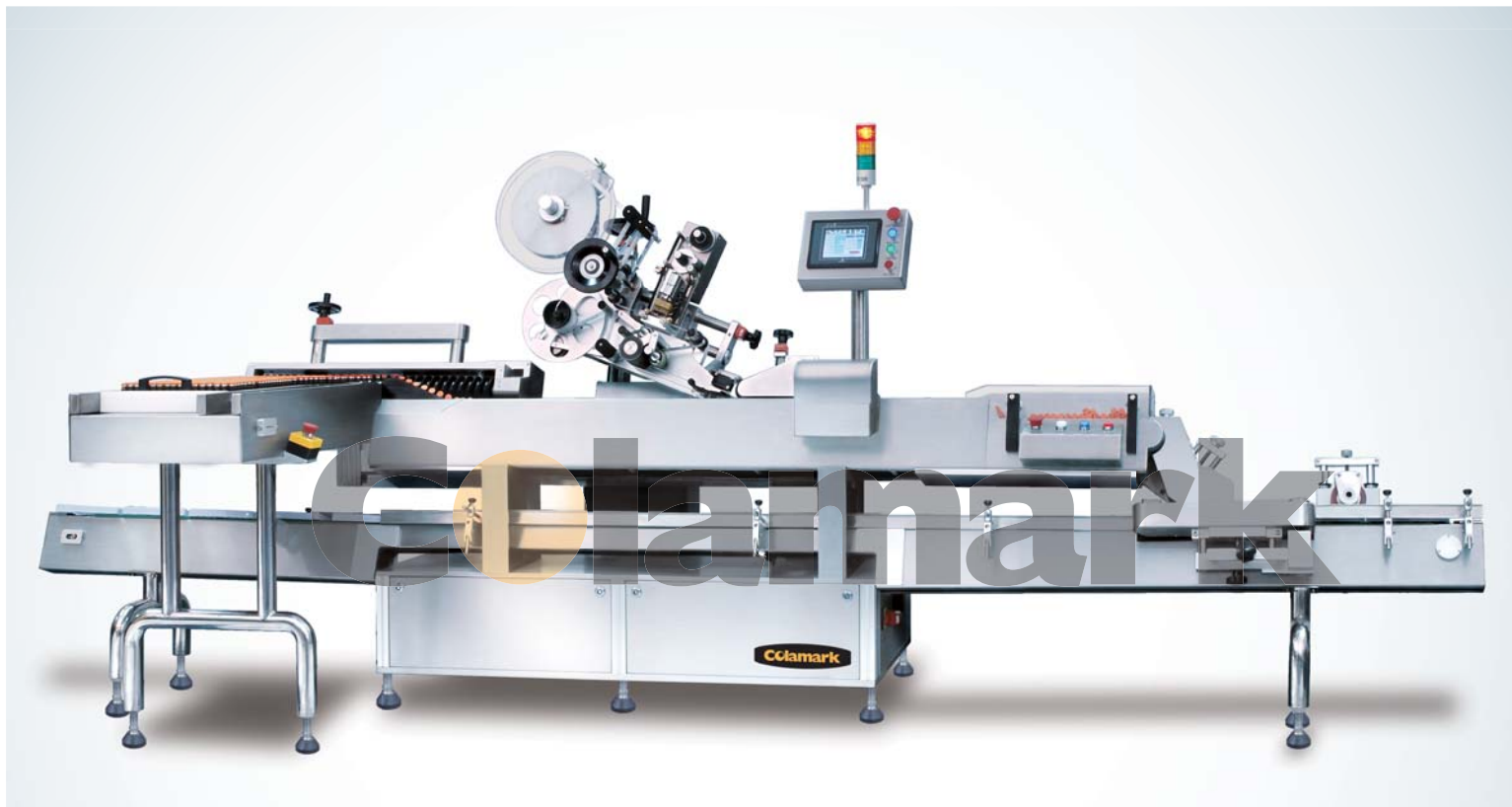


达尔嘉 A205R 高速卧式贴标入托系统

A205R是A205高速转姿卧式贴标机与RH1高速卧式入托机的完美组合，使贴标入托共序无缝结合，更加一气呵成，在运行稳定性、碎瓶率、速度、灵活性等方面的综合表现领导同侪

适用于安瓿瓶、西林瓶、以及其他窄小圆瓶的高速准确贴标、入瓶托



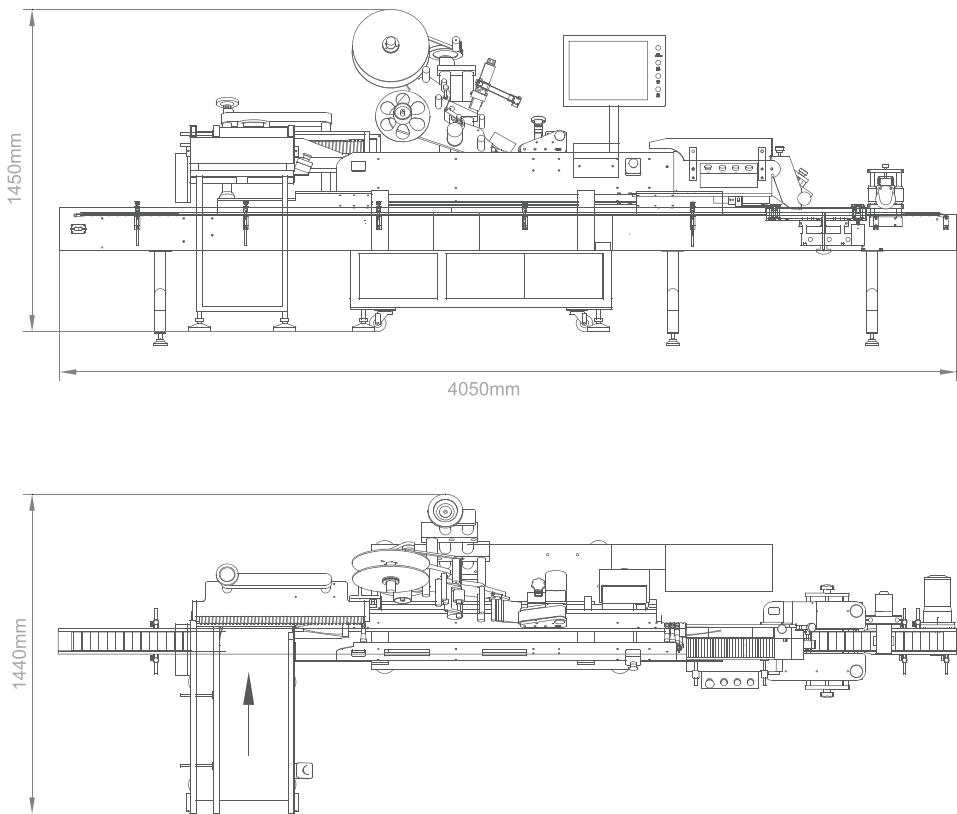

主要性能及特点

- 螺杆转姿分料，使系统可提供盘到盘立式进/收料的方便性之余，同时拥有卧式辊子输送贴标的灵活性及三点定位方式的高精度
 - 独有机构有效防止碎瓶，保证高速畅顺运行
 - 视像检测装置提供多种检测功能，如标签贴标检测、漏码检测以及打印内容检测等；不合格的瓶将被剔除回收
 - 精心设计独有的剔除机构，在调整运转时也能够准确检测及剔除错误物料
 - 新型入瓶托装置，实现调整准确地把贴标后的瓶子装入瓶托：
 - ▶ 瓶托多重检测定位，入托率极高
- ▶ 换用不同直径瓶子时，只需进行简单调整和参数设定，令操作更加简单快捷
 - ▶ 可通过瓶托输送带手动分托，或连线自动制托机、自动分托机自动送托
 - ▶ 入托缓冲仓完全与贴标动作同步配合：少托时，贴标速度会相应降低；缺瓶时，瓶托自动停止等候
- 可选配热烫印字设备、热转印、喷码机或激光打码机同步完成打码及贴标
 - 配套设备的运行状态和报警信息可在系统中实时反映

型号规格	A205R
被贴物范围	安瓿瓶1-20ml；□服液瓶、西林瓶7-20ml
贴标入瓶托速度	最大速度600瓶/分，稳定速度500支/分钟
贴标精度	±0.5mm（不计包装与标签误差）
电源及功率	220V 50Hz 2.2kW
整机尺寸	(L)4,050mm × (W)1,450mm × (H)1,440mm

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身定制的设计方案)

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布